

SCOPRI LA TECNOLOGIA INTUITIVA CHE UNISCE DUE SISTEMI DI PROFILASSI IN UNO!



Combina lo scaling ad ultrasuoni e il trattamento a polvere per un'igiene orale indolore, veloce ed efficace.



Ottimizza la rimozione del tartaro e della placca, minimizzando i tempi e il disagio del paziente.



Permette un controllo intuitivo ed intelligente dei parametri di impostazione.



Garantisce una grande versatilità in ogni applicazione grazie all'uso di glicina e bicarbonato.



PT-ATM

Il sistema multifunzionale professionale che può essere utilizzato per ogni esigenza di profilassi dentale



Air Polishing



Perio



Endo



Pulizia impianti

Resistente

L'unità è dotata di due serbatoi realizzati con materiali anti-corrosivi che permettono l'utilizzo di prodotti quali clorexidina, perossido di idrogeno ed ipoclorito di sodio.

Compatibile

Doppia possibilità di utilizzo: bicarbonato di sodio e glicina.

Vibrazione ellittica per un maggior controllo

Il sistema PT-A, grazie alla sua vibrazione ellittica, permette una migliore dispersione della forza d'impatto tra inserto e dente, preservando il dente da danni e lesioni.

Rimozione completa della placca e dei pigmenti

L'air polisher, dotato di micro-ugello, fornisce un significativo effetto sulle superfici occlusali, interprossimali, e perfino su bracket ortodontici da sempre di difficile pulizia.



Semplice nell'uso

Il grande schermo touch waterproof permette un controllo veloce e sensibile degli strumenti. L'utilizzo con guanti non comprometterà l'esperienza dell'utente.

Scegli PT-A per una miglior agilità nel lavoro di igiene dentale!

PT-A è il sistema multifunzionale che unisce sinergicamente gli strumenti indispensabili alla profilassi dentale: un ablatore piezoelettrico dalla tecnologia indolore, ideato per il trattamento sopra-sotto gengivale, ed uno sbiancatore plasmabile in accuratezza ad ogni esigenza applicativa.

PT-A è progettato per offrire un uso professionale intensivo, con un trattamento efficiente e confortevole che rende le operazioni di igiene e pulizia molto più sopportabili per il paziente.



Controllo touch intelligente e di facile comprensione su grande pannello interattivo LCD



Doppia modalità di erogazione dell'acqua: rete idrica, dispenser (600mL e 1400mL in dotazione)



Manipolo ultrasonico leggero ed ergonomico, a LED, con vibrazione ellittica per un ridimensionamento confortevole a 360°



Doppio manipolo per sbiancamento per funzionamento a bicarbonato di sodio e/o tramite glicina*



La "durezza" della polvere è molto più bassa di quella dello smalto, evitando così i classici danni alla superficie




L'ugello-micro per air polisher assicura una concentrazione maggiore sull'area trattata

*Lo sbiancamento con PT-A prevede il possibile utilizzo di eritritolo.

Cosa c'è da sapere sull'uso del sistema intuitivo PT-A?

L'ablatore è studiato per non segnare la superficie dei denti e lo sbiancatore per non danneggiare i tessuti molli. Il processo utilizza aria compressa per spruzzare polvere ed acqua riscaldata sulla superficie, in modo da rimuovere sostanze quali placca e pigmentazioni estrinseche e lucidare il dente. PT-A garantisce un trattamento efficiente che rende le operazioni di igiene e pulizia molto più sopportabili lato paziente.

L'unità riconosce e seleziona in modo automatico le funzioni per le applicazioni dedicate allo scaling oppure air polishing:

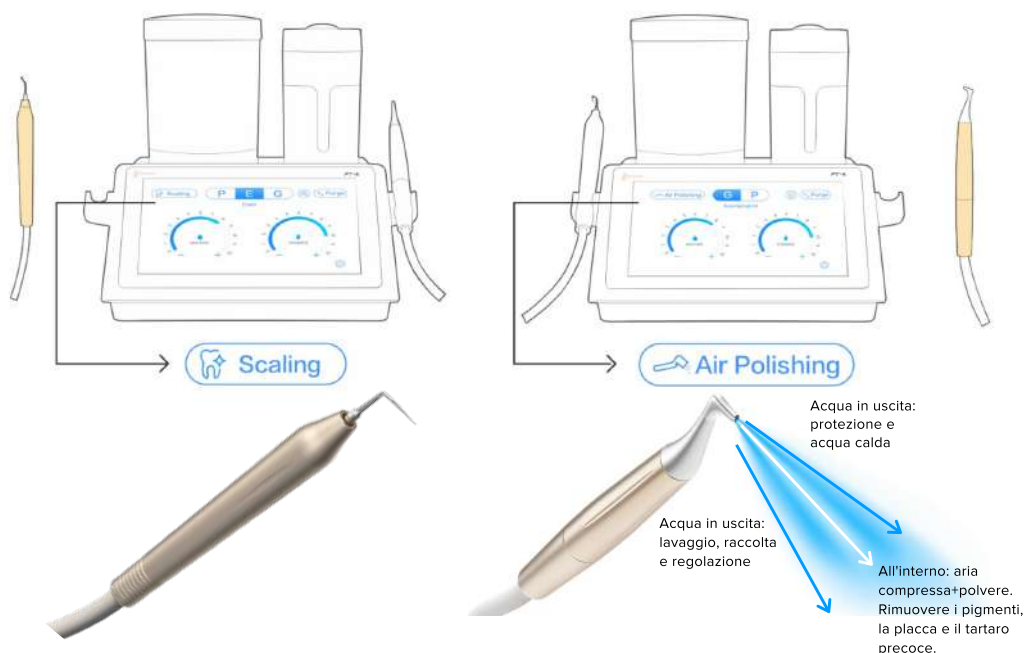

Tecnologia indolore


Lo strumento garantisce la rimozione del tartaro residuo a livello sopragengivale e sottogengivale, con un intervento mini-invasivo.

Funzione ultrasuoni


Il tartaro viene rimosso dai denti utilizzando le vibrazioni dell'inserto. Il dentista può regolare la vibrazione ultrasonica, e la pressione con cui l'inserto lavora sui denti.

Confort e flessibilità

Possibilità d'utilizzo di inserti standard oppure in titanio e il riscaldamento dell'acqua per il massimo confort paziente.

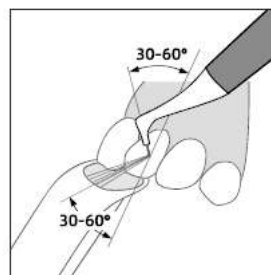

Angolazione consigliata: 30°- 60°

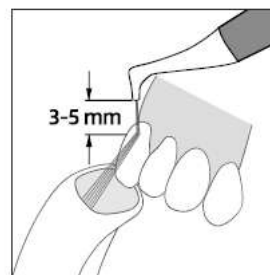

Distanza consigliata: 3-5 mm

Controllo della placca

La potenza dell'acqua e dell'aria consente di ottenere un buon rivestimento della superficie, riducendo le probabilità di adesione della placca. La sua forma ad imbuto garantisce un flusso di polvere stabile.

Manutenzione facile: il manipolo è smontabile in tre parti per una migliore pulizia e sicurezza.



Specifiche tecniche

Ablatore PT-A

€ 4.800,00
€ 3.360,00

Codice prodotto 563/00

Prodotto esclusivo all-in-one

Con un solo device l'igiene dentale è completa: ridimensionamento, parodontologia, endodonzia, pulizia impianti ed air polisher.



Sistema anti-bloccaggio integrato



L'air polisher dotato di micro-ugello

Un trattamento profilassi confortevole

Lo scopo del ridimensionamento e della lucidatura è quello di lasciare le superfici dei denti pulite e lisce in modo che i batteri non siano in grado di aderire.

Il sistema PT-A è stato progettato per offrire un comfort al paziente attraverso l'utilizzo di polveri a bassa abrasività.

Pedale di controllo multifunzione



Modalità con acqua



Modalità senza acqua



Standard



Rapida rimozione del tartaro

Accessori in dotazione

Manipolo ablatore	x 2	
Manipolo sbiancatore a bicarbonato	x 1	
Manipolo sbiancatore a glicina	x 1	
Doppio dispenser (bicarbonato/glicina)	600 ml	1400 ml

Pedale multifunzione	x 1
Box di sterilizzazione	x 2
Chiave dinamometrica	x 2
Polvere sbiancante (bicarbonato)	x 2
Valigia di trasporto	x 1

Mix di punte ultrasoniche (standard ed in titanio)

Punte titanio	P56 x 2	P59 x 1	P50L x 2	P50R x 2
Punte pulizia impianto	P94 x 2	P95 x 2		
Punte endo	E60x 2			



Dott.ssa Guerci Letizia



PT-A è diverso dai sistemi che ho provato in passato. Grazie alla sua versatilità, PT-A può essere utilizzato anche su restauri, impianti, ortodonzia e superfici radicolari.



Non solo elimina la placca e le macchie che i miei pazienti possono sentire e vedere, ma offre un'esperienza indolore con risultati ottimali in poco tempo sulla poltrona.



www.poliambulatoriocrodent.it